

User Guide

Giant

Extra Loud Speakerphone



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To prevent severe injury and loss of life/property, read this section carefully before using the product to ensure proper and safe operation of your product.



Power connection

- Use only the power source marked on the product.
- Do not overload power outlets and extension cords. This can result in the risk of fire or electric shock.
- Completely insert the AC adapter/power plug into the power outlet. Failure to do so may cause electric shock and/or excessive heat resulting in a fire.
- Regularly remove any dust, etc. from the AC adapter/power plug by pulling it from the power outlet, then wiping with a dry cloth. Accumulated dust may cause an insulation defect from moisture, etc. resulting in a fire.
- Unplug the product from power outlets if it emits smoke, and abnormal smell, or makes an unusual noise. These conditions can cause fire or electric shock. Confirm that smoke has stopped emitting and contact the Clarity Customer Service at 800-426-3738.
- Unplug from power outlets and never touch the inside of the product if its casing has been broken open.
- Never touch the plug with wet hands. Danger of electric shock exists.

Installation

- To prevent the risk of fire or electrical shock, do not expose the product to rain or any type of moisture.
- Do not place or use this product near automatically controlled devices such as automatic doors and fire alarms. Radio waves emitted from this product may cause such devices to malfunction resulting in an accident.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not allow the AC adaptor or telephone line cord to be excessively pulled, bent or placed under heavy objects.

Operating safeguards

- Unplug the product from power outlets before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners.
- Do not disassemble the product.
- Do not spill liquids (detergents, cleansers, etc.) onto the telephone line cord plug, or allow it to become wet at all. This may cause a fire. If the telephone line cord plug becomes wet, immediately pull it from the telephone wall jack, and do not use.

Medical

- Consult the manufacturer of any personal medical devices, such as pacemakers or hearing aids, to determine if they are adequately shielded from external RF (radio frequency) energy. (The product operates in the frequency range of 1.92 GHz to 1.93 GHz, and the RF transmission power is 115 mW (max.). Do not disassemble the product.
- Do not use the product in health care facilities if any regulations posted in the area instruct you not to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT BATTERY SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not mix old and new batteries.
- Do not open or mutilate the batteries. Released electrolyte from the batteries is corrosive and may cause burns or injury to the eyes and skin. The electrolyte is toxic and may be harmful if swallowed.
- Exercise care when handling the batteries. Do not allow conductive materials such as rings, bracelets, or keys to touch the batteries, otherwise a short circuit may cause the batteries and/or the conductive material to overheat and cause burns.
- Charge the batteries (optional) identified for use with this product only, in accordance with the instructions and limitations specified in this manual.
- Only use a compatible base unit (or charger) to charge the batteries. Do not tamper with the unit (or charger). Failure to follow these instructions may cause the batteries to swell or explode.

The base batteries are optional (for backup only). If you choose to install backup batteries, **use rechargeable batteries ONLY**. The backup batteries should be AA, NiMH, rechargeable only, rated 1600mAh. They must be fully charged for 8 hours before using the backup batteries (before using the phone without the power adapter, during a power outage).

The backup batteries ensure the functionality of your unit for 3-4 hours in case of a power outage.

To install batteries in the base:

1. Turn the unit over and open battery compartment door.
2. Install batteries according to the polarity shown inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment.

**WARNING: USE RECHARGEABLE BATTERIES ONLY.
DO NOT USE ALKALINE BATTERIES!**

**CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES
ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CARE AND MAINTENANCE

FOR BEST PERFORMANCE

Base unit location/avoiding noise

The base unit and other compatible Clarity units use radio waves to communicate with each other.

- For maximum coverage and noise-free communications, place your base unit at a convenient, high, and central location with no obstructions between the handset and base unit in an indoor environment.
 - a. away from electronic appliances such as TVs, radios, personal computers, wireless devices, or other phones.
 - b. facing away from radio frequency transmitters, such as external antennas of mobile phone cell stations. (Avoid putting the base unit on a bay window or near a window.)
- Coverage and voice quality depends on the local environmental conditions.
- If the reception for a base unit location is not satisfactory, move the base unit to another location for better reception.

Environment

- Keep the product away from electrical noise generating devices, such as fluorescent lamps and motors.
- The product should be kept free from

excessive smoke, dust, high temperature, and vibration.

- The product should not be exposed to direct sunlight.
- Do not place heavy objects on top of the product.
- When you leave the product unused for along period of time, unplug the product from the power outlet.
- The product should be kept away from heat sources such as heaters, kitchen stoves, etc. It should not be placed in rooms where the temperature is less than 0 °C (32 °F) or greater than 40 °C (104 °F). Damp basements should also be avoided.
- The maximum calling distance may be shortened when the product is used in the following places: Near obstacles such as hills, tunnels, underground, near metal objects such as wire fences, etc.
- Operating the product near electrical appliances may cause interference. Move away from the electrical appliances.

Routine care

- Wipe the outer surface of the product with a soft moist cloth.
- Do not use benzene, thinner, or any abrasive powder.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions:

10.197 in. x 6.299 in. x 5.118 in.

Weight: 32.275 oz. (without AC adapter)

Standard: DECT 6.0 (Digital Enhanced Cordless Telecommunications 6.0)
Bluetooth wireless technology 2.0

Frequency range: 1.92 GHz to 1.93 GHz (DECT)
2.402 GHz to 2.48 GHz (Bluetooth)

RF transmission power:

100 mW (MAX)

Power specifications: AC Adapter

Input: 100V-240V AC, 50-60Hz

Output: 12V DC, 1.5A

Use ONLY the power adapter supplied with your unit; using a different adapter may render your unit unusable and voids the warranty.

Power consumption:

Standby: 0.54W

Maximum: 15W

Battery information: Use ONLY rechargeable batteries, NiMH, AA, 1600mAh

Charge time: 8 hours
(from discharged to fully charged)

Note: *The batteries are charging while your phone is powered by the power adapter supplied with your unit.*

Standby time: Approx. 24 hours.

Talk time:


Giant: Approx. 4 hours

Operating conditions: 32 °F – 104 °F,
20 % – 80 % relative air humidity (dry)


PACKAGE CONTENTS



Giant

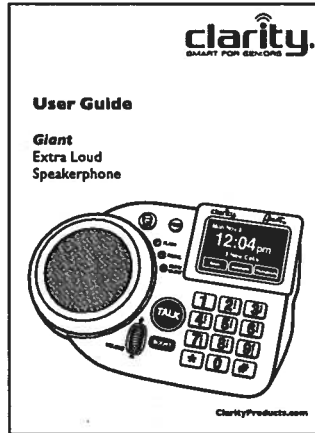

User Guide and
Quick Start Guide

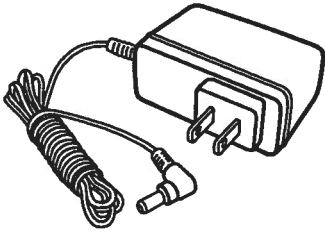

AC Power Adapter



Phone cord


Recommended Accessories *(Optional purchase)*

- XLC3.5HSB Expandable Handset (59524.000)
- Voyager Legend Bluetooth Headset (87300-01)

GETTING TO KNOW YOUR SPEAKERPHONE


Please take a moment to review your new product and its features.

This user guide applies to both versions. If your unit does not have an answering machine, ignore references to this feature during the review of this user guide.

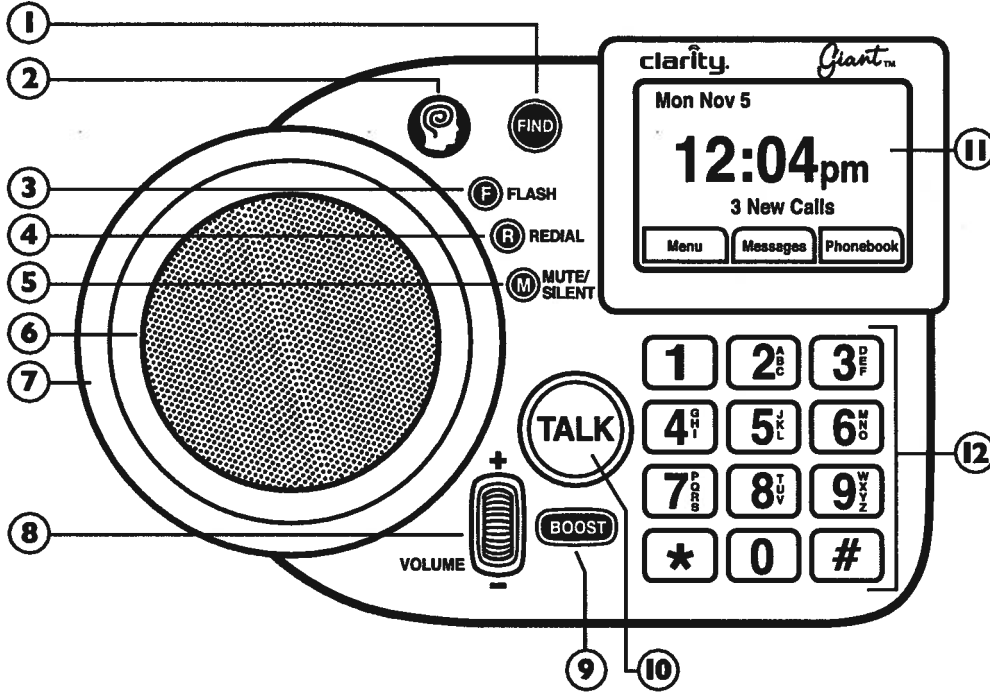

GETTING TO KNOW YOUR SPEAKERPHONE

11	TOUCHSCREEN
12	NUMERIC KEYPAD
13	POWER PORT <ul style="list-style-type: none">• Plug in AC power adapter. <i>(provided)</i>
14	LINE PORT <ul style="list-style-type: none">• Plug in phonecord. <i>(provided)</i>
15	BATTERY COMPARTMENT <ul style="list-style-type: none">• Use 6 AA rechargeable batteries to ensure continuous functionality in case of a power outage. <i>(see battery safety section)</i>

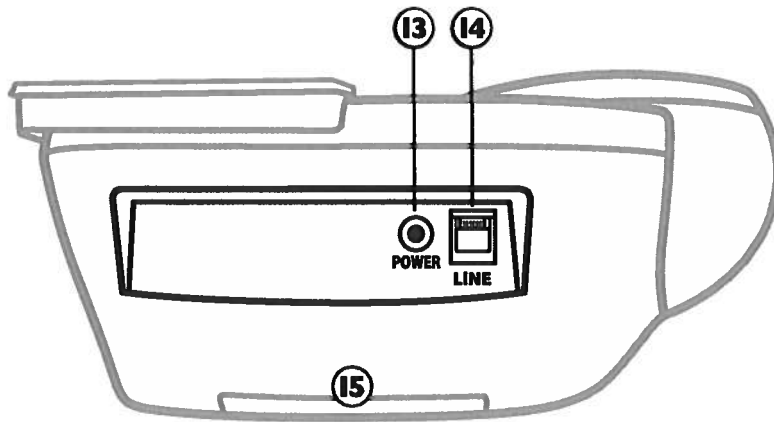


GETTING TO KNOW YOUR SPEAKERPHONE

Menu navigation buttons

(Press Up or Down buttons to scroll the menu listings.)

Functional buttons

Use these buttons to make selections, move backward, save, delete, and other functions.

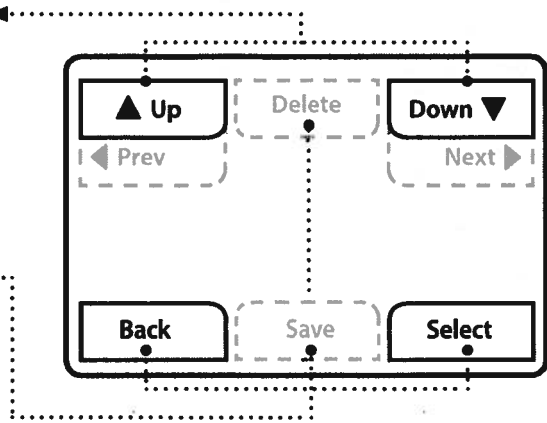

(Figure 1)


Automatic update of date and time

(with CID service)

Note: Must be initially set within the **System Setup Menu, Set Time/Set Date** in order for this feature to work correctly.

Automatic alert status of phone system operations

- Status of Answering Machine (ON/OFF)
- Phone line status (No Line) will display if phone cord not attached.
- Display of New Messages
- Ringer ON/OFF

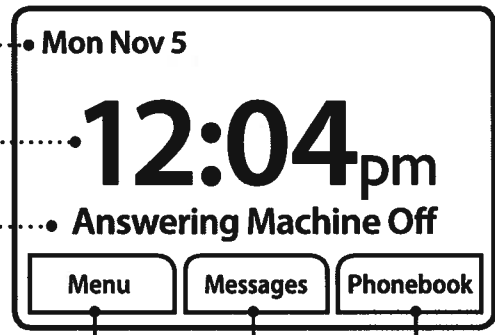

Touch buttons
Access the virtual menu features of the phone.

(Figure 2)

USING YOUR SPEAKERPHONE

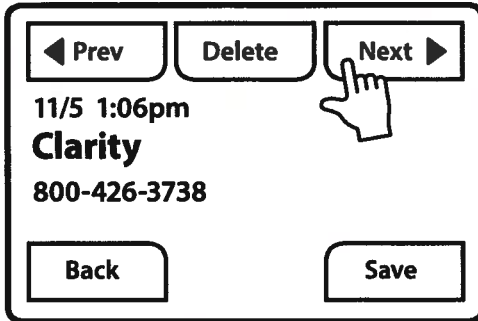


Figure 7

Call timer

Your speakerphone automatically times the duration of every call. During the call the timer (Figure 8) will display the call duration in hours, minutes, and seconds. After the call is made, a “Talk Time” screen will display the total call time.

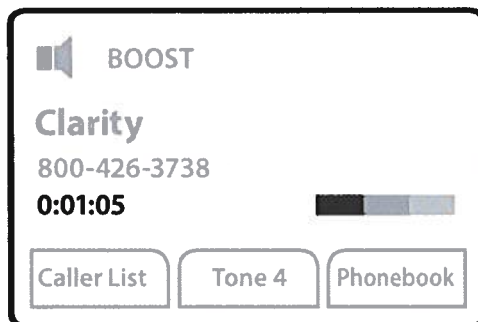


Figure 8

RECEIVING CALLS

Answer a call

When there is an incoming call, the Visual Ringer will blink, and the ring tone will sound. (Figure 9)

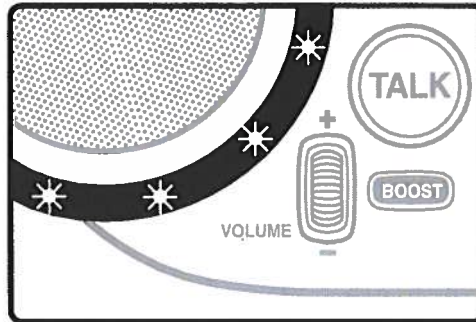


Figure 9

When a call is incoming, the menu screen will display “Ringing”.

Note: To disable the audible ringer, press MUTE/SILENT.

Upon connection, the menu screen will display call information. (Figure 10-11)



Figure 10

USING YOUR SPEAKERPHONE

End a call

During a call you can press the “TALK” button to end the call.

Note: During a call you can press the “Flash” button to switch between calls. However, you must subscribe to Call Waiting as part of your phone service.

FCC REQUIREMENTS AND REGULATIONS

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

This equipment is hearing aid compatible as defined by the FCC in 47 CFR Section 68.316.

When you hold the phone to your ear, noise might be heard in your Hearing Aid. Some Hearing Aids are not adequately shielded from external RF (radio frequency) energy. If noise occurs, use an optional headset accessory or the speakerphone option (if applicable) when using this phone. Consult with your audiologist or Hearing Aid manufacturer about the availability of Hearing Aids which provide adequate shielding to RF energy commonly emitted by digital devices.

WHEN PROGRAMMING EMERGENCY NUMBERS AND (OR) MAKING TEST CALLS TO EMERGENCY NUMBERS:

1. Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.
2. Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evenings.

PART 15 OF FCC RULES INFORMATION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Privacy of communications may not be ensured when using this phone.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off

FCC REQUIREMENTS AND REGULATIONS

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

WARNING: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

The Ringer Equivalence Number is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed five (5.0).

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. [The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.]

PARTY RESPONSIBLE FOR REGULATORY COMPLIANCE:

Clarity, a Division of Plantronics, Inc.
6131 Preservation Drive
Chattanooga, TN 37416
Phone: 800-426-3738

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez attentivement cette section avant utilisation de manière à garantir un fonctionnement correct et sécurisé de votre produit et éviter tout risque de blessure, accident mortel ou dégât à la propriété.



Connexion électrique

- Utilisez uniquement la source d'alimentation indiquée sur le produit.
- Ne surchargez pas les prises d'alimentation et rallonges électriques. Cela peut entraîner un risque d'incendie ou de commotion électrique.
- Insérez complètement l'adaptateur CA/fiche d'alimentation dans la prise d'alimentation. À défaut, vous courez le risque de provoquer une commotion électrique et/ou une surchauffe pouvant occasionner un incendie.
- Nettoyez régulièrement la poussière, etc. de l'adaptateur/fiche d'alimentation en retirant de la prise d'alimentation, puis en essuyant avec un chiffon sec. L'accumulation de poussière peut provoquer un défaut de l'isolation contre la pénétration de l'humidité, etc. et entraîner un incendie.
- Débranchez le produit des prises d'alimentation si de la fumée ou une odeur anormale s'en échappent, ou s'il émet un bruit inhabituel. Ces manifestations peuvent provoquer un incendie ou une commotion électrique. Assurez-vous que l'émission de fumée s'est arrêtée et contactez le Service client de Clarity au 800-426-3738.
- Débranchez des prises d'alimentation et ne touchez jamais l'intérieur du produit si son boîtier a été forcé.
- Ne touchez jamais la prise avec les mains mouillées. Le risque de commotion électrique existe.

Installation

- Pour prévenir le risque d'incendie ou de commotion électrique, n'exposez pas le produit à la pluie ou à tout type d'humidité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Installation et positionnement

- Ne jamais procéder au câblage du téléphone pendant un orage.
- Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des lieux humides à moins que la prise ne soit spécifiquement conçue pour des lieux humides.
- Ne jamais toucher de fils téléphoniques ou de bornes non isolées à moins que la ligne téléphonique n'ait été préalablement débranchée de l'interface réseau.
- Faire preuve de prudence lors de l'installation ou de la modification des lignes téléphoniques.
- L'adaptateur secteur est utilisé en tant que dispositif principal de déconnexion. Assurez-vous que la prise secteur est installée à proximité du produit et facilement accessible.
- Ce produit ne peut pas effectuer d'appels lors d'une panne d'électricité (à moins que les piles de secours ne soient installées et complètement chargées).

Pendant l'utilisation de votre produit, les précautions basiques de sécurité doivent toujours être respectées afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures aux personnes. Ces précautions sont les suivantes :

- Ne pas utiliser ce produit à proximité d'une source d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une cuve de lessivage, dans une cave mouillée ou près d'une piscine.
- Éviter d'utiliser un téléphone (autre que sans fil) pendant un orage. Il peut y avoir un risque infime de choc électrique dû à la foudre.
- Ne pas utiliser le téléphone pour signaler une fuite de gaz à proximité de la fuite en question.
- Utiliser uniquement le cordon d'alimentation et les piles indiqués dans ce guide.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LIÉES AUX PILES

AVERTISSEMENT : UTILISEZ UNIQUEMENT DES PILES RECHARGEABLES. N'UTILISEZ PAS DE PILES ALCALINES !
ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR UNE PILE INAPPROPRIÉE. JETEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT : JETEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

- Ne jetez pas la pile au feu : elle pourrait exploser. Vérifier dans les codes locaux les directives spéciales en matière de traitement des déchets.
- Ne pas ouvrir ou couper la pile. L'électrolyte qui s'en échappe est corrosif et peut provoquer des blessures aux yeux et à la peau. Il peut être toxique s'il est avalé.
- Faites preuve de prudence dans la manipulation des piles, afin de ne pas provoquer de court-circuit au contact de matériaux conducteurs tels que des bagues, bracelets ou clés. La pile ou le matériau conducteur peut surchauffer et provoquer des brûlures.
- Retirez les piles quand elles sont déchargées et lorsque l'équipement ne doit plus être utilisé pendant une période prolongée. Jetez les piles conformément à la législation environnementale locale.
- Ne désassemblez pas les piles, ne les chauffez pas, ne les broyez pas, ne les déformez pas ni ne les percez.
- N'essayez pas de charger des piles non rechargeables.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSERVATION ET ENTRETIEN

Routine d'entretien

- Essuyez la surface extérieure du produit avec un chiffon doux humide.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant ou de poudre abrasive.

Avis concernant l'élimination, la cession ou le retour du produit

- Ce produit peut stocker vos informations privées / confidentielles. Afin de protéger votre vie privée / confidentialité, nous vous recommandons d'effacer les informations de type répertoire ou liste d'appels de votre mémoire avant de jeter, céder ou retourner le produit.
- Ce produit est conçu pour être utilisé aux États-Unis d'Amérique et au Canada. La vente ou l'utilisation de ce produit dans d'autres pays peut constituer une violation de la législation locale.

Dimensions : 10,197 po. x 6,299 po. x 5,118 po. (26 cm x 16 cm x 13 cm)

Introduction à Clarity Logic

ClarityLogic est le nom de notre service d'assistance au client simplifié et facile à utiliser. Lorsque vous parlez avec un représentant de Clarity, le téléphone envoie à Clarity des informations comme le nom du modèle et les paramètres. Le représentant est donc immédiatement informé du type de téléphone et des paramètres utilisés. Cela permet de réaliser des communications de dépannage à la fois simples et rapides, qui vous aident à trouver exactement ce dont vous avez besoin. Appelez simplement le 1-877-LOGIC24 (1-877-564-4224) pour constater à quel point Clarity peut vous simplifier la vie.

Touche mémoire ClarityLogic®

Pour votre confort, Clarity a préprogrammé le numéro d'assistance client sur le bouton bleu ClarityLogic de votre téléphone.

Remarque : *ClarityLogic a été conçu pour fonctionner avec le service téléphonique de base. Si votre service téléphonique est pourvu par un fournisseur de large bande, ClarityLogic peut ne pas fonctionner. SEUL CLARITYLOGIC PEUT ÊTRE DÉACTIVÉ. TOUTES LES AUTRES CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNENT CONFORMÉMENT AUX DESCRIPTIONS DE CE GUIDE DE L'UTILISATEUR.*

INSTALLATION

Merci d'avoir acheté votre nouveau Giant de Clarity – le meilleur haut-parleur pour domicile dans sa catégorie. Veuillez lire ces instructions pour vous assurer d'exploiter pleinement l'ensemble des fonctions offertes par ce produit.

Votre produit est déjà assemblé lorsque vous le sortez de son emballage. Cependant, vous devrez connecter les cordons d'alimentation et téléphonique, et installer six (6) piles rechargeables NiMH AA si vous souhaitez disposer de piles de secours en cas de coupure de courant. (Optionnel ; piles non incluses).

Connecter les cordons d'alimentation et téléphonique

Étape 1 : Localisez une prise électrique (1) à proximité d'une prise téléphonique de votre domicile.

Étape 2 : Tirez sur les extrémités du cordon téléphonique pour démêler le cordon ; branchez l'extrémité libre du cordon téléphonique à la prise téléphonique (2).





Étape 3 : Tirez sur les extrémités d cordon d'alimentation pour démêler le cordon ; branchez l'alimentation électrique sur la prise électrique (3).

Installation des piles (optionnel)

Étape 1 : Faites glisser le couvercle du compartiment à piles vers le haut pour le retirer.

Étape 2 : Insérez six (6) piles rechargeables NiMH AA comme indiqué. Faites correspondre les bornes (+) et (-) de chaque pile avec les connexions (+) et (-) situées dans le compartiment à piles.

Étape 3 : Refaites glisser le couvercle du compartiment à piles sur sa position initiale pour terminer l'installation des piles.

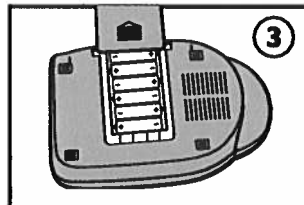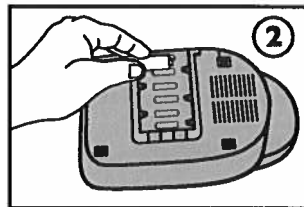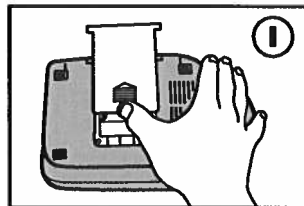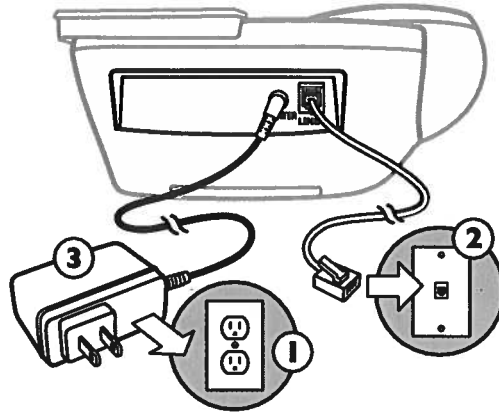

PRÉSENTATION DE VOTRE HAUT-PARLEUR

1	FIND (RECHERCHER) <ul style="list-style-type: none">• Appuyez pour trouver le combiné sans fil. <i>(optionnel, acheté séparément)</i>
2	CLARITY LOGIC <ul style="list-style-type: none">• Appuyez pour contacter directement les représentants de votre service client ClarityLogic. Cel vous permet de disposer d'une assistance haut de gamme pour votre produit via notre technologie brevetée d'accès à distance personnalisé.
3	FLASH <ul style="list-style-type: none">• Appuyez pour commuter des appels <i>(si vous souscrivez à l'appel en attente auprès de votre service téléphonique) memory key.</i>
4	RECOMPOSER <ul style="list-style-type: none">• Appuyez pour recomposer le dernier numéro de téléphone que vous avez appelé. Appuyez et maintenez enfoncé pour une pause de 2 secondes lorsque vous programmez les contacts de votre répertoire.
5	DISCRÉTION / SILENCIEUX <ul style="list-style-type: none">• Pendant une sonnerie – appuyez pour couper temporairement le son de la sonnerie. <i>(pour les appels en cours uniquement)</i>• Pendant un appel – appuyez pour couper le son de votre côté du combiné. <i>(pour garantir la confidentialité P le voyant rouge du bouton clignote pour indiquer que le son est temporairement coupé)</i>• Pendant le mode veille – appuyez pour couper le son de la sonnerie. <i>(le voyant rouge du bouton reste allumé lorsque la sonnerie est éteinte)</i>
6	HAUT-PARLEUR
7	INDICATION VISUELLE DE SONNERIE <ul style="list-style-type: none">• Clignote lorsque des appels sont reçus.
8	CONTRÔLE DU VOLUME <ul style="list-style-type: none">• Faites rouler la molette vers le haut ou vers le bas pour augmenter / baisser le volume.
9	AMPLIFICATEUR <ul style="list-style-type: none">• Appuyez pour mobiliser davantage de puissance pour votre haut-parleur.
10	CONVERSATION <ul style="list-style-type: none">• Appuyez pour commencer / terminer un appel téléphonique.

PRÉSENTATION DE VOTRE HAUT-PARLEUR

Votre écran tactile dispose de boutons virtuels qui vous assisteront dans le fonctionnement simple de ce produit.

Instructions générales pour naviguer dans les menus et écrans de votre affichage (voir Figure 1)

- À n'importe quel moment de la navigation au sein des menus et paramètres, appuyez sur Flash pour revenir à l'écran de veille.
- Utilisez les boutons fléchés sur l'écran pour faire dérouler vers le haut ou vers le bas les options du menu. Situés dans les coins supérieurs gauche et droit de l'écran de menu LCD.
- Utilisez le bouton « Back » (Retour) sur l'écran (situé dans le coin inférieur gauche de l'écran menu LCD) pour revenir au niveau précédent dans le menu des paramètres.
- Utilisez le bouton Save (Sauvegarder) sur l'écran pour enregistrer vos paramètres ; pour sortir sans effectuer de sauvegarde, utilisez Back (Retour) pour rejeter les modifications et revenir à l'écran précédent.

En mode veille, votre Giant affiche les informations suivantes sur son écran (voir Figure 2)

- **Statut du répondeur** : (ON ou OFF) Si la ligne téléphonique n'est pas branchée à l'unité : (No line – pas de ligne) en alternance avec le statut du répondeur.
- **Date / Heure** : Doit être configuré manuellement dans le menu (voir ci-dessous) pour conserver avec précision l'heure des différents messages laissés sur votre répondeur)
- **Bouton Menu** : P Permet d'accéder aux paramètres de votre haut-parleur.
- **Bouton Messages** : P Permet d'accéder facilement aux messages laissés sur votre répondeur si votre modèle est équipé de l'option répondeur. Si votre modèle ne dispose pas de cette option, le bouton « Messages » ne figurera pas sur l'écran.
- **Bouton Répertoire** : P Permet d'accéder facilement aux emplacements mémoire des numéros téléphoniques que vous composez le plus souvent.

UTILISER VOTRE HAUT-PARLEUR

RÉALISER DES APPELS

Il existe quatre méthodes pour réaliser un appel externe à l'aide de votre haut-parleur. Numérotation préparatoire, numérotation directe, numérotation répertoire et numérotation à partir de la liste de renumérotation.

Numérotation préparatoire

Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du clavier numérique puis appuyez sur le bouton « Parler ». (Figure 3)

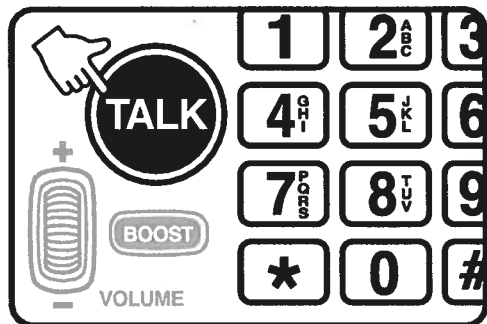


Figure 3

Numérotation directe

Appuyez sur le bouton « Parler » puis composez manuellement le numéro à l'aide du clavier numérique. (Figure 3)

Numérotation répertoire

Appuyez sur le bouton menu « Répertoire » sur l'écran principal (Figure 4) pour accéder au répertoire téléphonique. Appuyez sur le bouton « Suivant » ou « Précédent » (Figure 5) pour trouver le numéro de téléphone que vous

souhaitez composer, puis appuyez sur le bouton « Parler ».



Figure 4

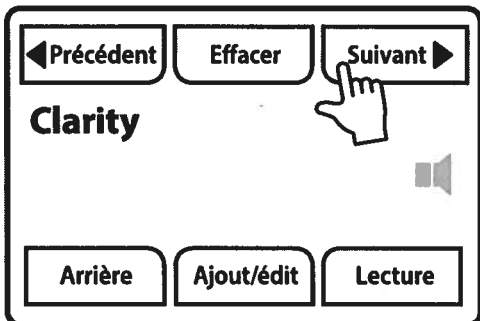


Figure 5

Numérotation à partir de la liste de renumérotation

Appuyez sur le bouton « Recomposer » (Figure 6) sur la gauche de l'écran du menu,

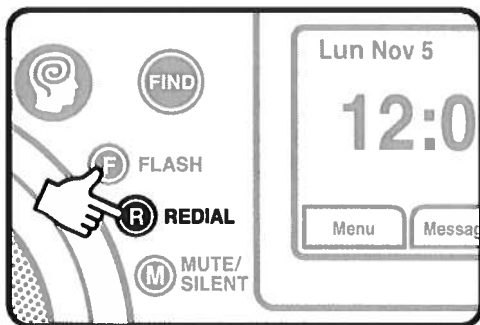


Figure 6

UTILISER VOTRE HAUT-PARLEUR



9/28 2:00pm
L'APPELANT SANS FIL
800-426-3738

Figure 11

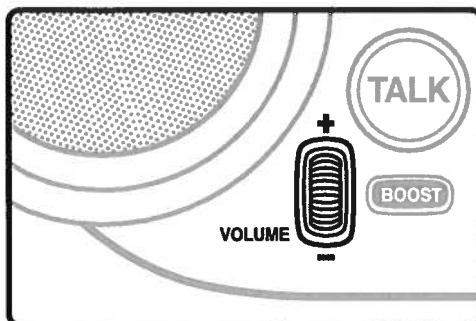


Figure 12

Pour répondre et connecter l'appel, appuyez sur le bouton « Parler ».

Remarque : Vous devez configurer « Réponse automatique » sur Marche dans le « Menu avancé » pour que l'appel soit automatiquement répondu.

Remarque : Vous devez souscrire aux services d'identification de l'appelant auprès de votre fournisseur de service téléphonique pour que des informations complémentaires portant sur l'identification de l'appelant soient affichées.

Pendant un appel

Utilisez la molette de volume (Figure 12) et le bouton Tone (Tonalité) sur l'écran (Figure 13) pour ajuster de la meilleure manière la prestation audio pendant un appel.

Appuyez sur le bouton Tonalité sur l'écran ; vous pourrez visualiser le réglage de tonalité actuel sous la forme d'un graphique. Pendant que le graphique est affiché sur votre écran, appuyez à nouveau sur le bouton Tonalité pour modifier les

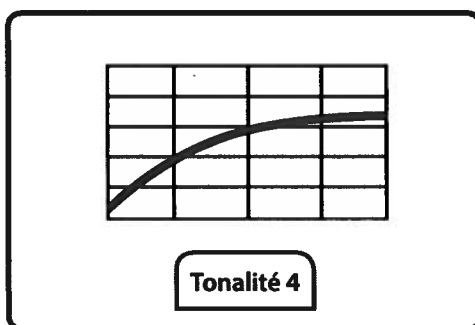


Figure 13

paramètres de tonalité disponibles (il existe 4 paramètres sur cette unité). Quand les ajustements audio vous semblent réglés conformément à vos besoins, revenez à l'écran précédent.

Ajustez le volume de la voix de l'interlocuteur en utilisant la molette P faites-la rouler vers le haut pour augmenter le volume, et vers le bas pour le baisser. Quand vous faites rouler la molette pour augmenter la force sonore, vous pouvez visualiser trois couleurs différentes sur l'écran.

EXIGENCES ET RÉGLEMENTATIONS DE LA FCC

RENSEIGNEMENTS SUR LA SECTION 68 DU RÉGLEMENT FCC

Cet équipement est conforme à la section 68 des règlements de la FCC et aux exigences adoptées par l'ACTA. Sous cet équipement se trouve une étiquette indiquant, entre autres informations, le code d'identification du produit au format américain : ACJ-----.

- S'il est requis, ce numéro doit être fourni à la compagnie de téléphonie.
- Enregistrement No.....(visible sous l'unité)
- Ringer Equivalence No. (REN).....0,1B

La fiche et la prise utilisées pour connecter cet équipement au câblage et au réseau téléphonique des lieux doivent être conformes à la section 68 des règlements applicables de la FCC et aux exigences adoptées par l'ACTA. Un cordon téléphonique et une fiche modulaire conformes sont fournis avec ce produit. Il est conçu pour être branché à une prise modulaire compatible qui soit aussi conforme.

L'IES est utilisé afin de déterminer le nombre d'appareils qui peuvent être connectés à une ligne téléphonique. Un IES excessif sur une même ligne téléphonique peut empêcher les appareils de sonner lors de l'entrée d'un appel. Dans la plupart mais pas dans toutes les régions, la somme des IES ne doit pas excéder cinq (5,0).

Pour connaître avec certitude le nombre d'appareils pouvant être connectés à une

ligne comme déterminé par l'IES total, contactez la compagnie de téléphonie locale. Pour les produits approuvés après le 23 juillet 2001, l'IES du produit fait partie du code d'identification du produit qui est au format américain : AAAEQ##TXXXX. Les chiffres représentés par ## correspondent à l'IES sans virgule décimale (par ex. 03 correspond à un IES de 0,3).

Si cet équipement endommage le réseau téléphonique, la compagnie de téléphonie vous informera à l'avance du besoin possible de procéder à une interruption temporaire du service. Dans l'éventualité où il s'avèrerait impossible de prévenir le client à l'avance, la compagnie de téléphonie informera ce dernier dès que possible. Vous serez également informé(e) de votre droit de déposer une plainte auprès de la FCC si vous le jugez nécessaire.

La compagnie de téléphonie peut apporter des modifications à ses installations, son équipement, ses opérations ou ses procédures qui peuvent affecter le fonctionnement de l'équipement. Si cela se produit, la compagnie de téléphonie vous préviendra à l'avance afin que vous puissiez prendre les mesures nécessaires pour garantir un service ininterrompu. Si vous rencontrez des problèmes avec cet équipement, veuillez contacter un Centre de service fabricant ou un autre réparateur autorisé pour solliciter une réparation ou de l'information sur la garantie. Si l'équipement provoque des dommages sur le réseau téléphonique, la compagnie

EXIGENCES ET RÉGLEMENTATIONS DE LA FCC

Classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été établies de manière à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, il peut provoquer des interférences qui affecteront les communications radio. Il est toutefois impossible de garantir qu'aucune interférence ne survienne dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou changez d'emplacement l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise se trouvant sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Obtenez l'aide du détaillant ou d'un technicien expérimenté en radio/télévision.

Certains téléphones sans fil fonctionnent à des fréquences qui peuvent provoquer des interférences aux téléviseurs et magnétoscopes se trouvant à proximité. Pour

minimiser ou prévenir de telles interférences, la base du téléphone sans fil ne doit pas être placée à proximité ou sur un téléviseur ou magnétoscope. En présence d'une interférence, éloignez davantage le téléphone sans fil du téléviseur ou magnétoscope. Cela permettra souvent de réduire ou d'éliminer l'interférence.

Avertissement de la FCC concernant l'exposition aux fréquences radio :

- Ce produit est conforme aux limites d'exposition aux radiations établies par la FCC pour un environnement non contrôlé.
- Pour être conforme aux exigences FCC en termes d'exposition aux fréquences radio, l'unité de base doit être installée et activée de manière à ce qu'une distance de 20 cm (8 pouces) soit maintenue entre le produit et le corps des personnes (à l'exception des mains, poignets et pieds).
- Ce produit ne devrait pas être placé ou mis en marche conjointement avec une autre antenne ou émetteur.
- Le combiné doit être porté et activé uniquement avec l'agrafe de ceinture spéciale fournie. Toute autre agrafe de ceinture non testée ou accessoire portable similaire peut ne pas être conforme et doit être évité.

Avis

L'identifiant FCC est visible à l'intérieur du compartiment à piles ou sous les unités.

GARANTIE ET SERVICE D'ENTRETIEN

Garantie Limitée : Clarity, Une Division de Plantronics, Inc. (« Clarity ») garantie à l'acheteur original que, sauf les limitations et les exclusions présentées ci-dessous, ce produit sera sans défaut en matériel et en fabrication pour une période d'un (1) an après la date d'achat. (« Période de Garantie »). L'obligation de Clarity sous cette garantie sera à l'option de Clarity, sans frais, pour n'importe quelle pièce ou unité qui se montre défectueuse dans le matériel ou dans la fabrication pendant la période de garantie.

Les Exclusions de Garantie : Cette garantie s'applique seulement aux défauts de matériel et de fabrication. N'importe quelle condition provoquée par accident, abus, ou par une opération inexacte, une violation des directives fournies par Clarity, la destruction ou le changement, les tensions ou les courants électriques inexacts, ou les réparations et les entretiens essayés par quelqu'un autrement que Clarity ou un centre commercial autorisé, n'est pas un défaut couvert par cette garantie. Les compagnies téléphoniques fabriquent de l'équipement de types différents, ainsi, Clarity donne aucune garantie que son équipement soit compatible avec l'équipement d'une compagnie téléphonique particulière.

Garanties Tacites : Sous les lois de l'État, vous pourriez avoir droit à l'avantage de certaines garanties tacites. Ces Garanties Tacites continueront en vigueur seulement pour la durée de la

garantie. Certains États ne permettent pas d'avoir de limitation sur comment longtemps une garantie tacite dure, donc les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer.

Dommages Fortuits ou Indirects Clarity, votre détaillant ou votre distributeur n'ont aucune responsabilité pour aucun dommage fortuit ou indirect incluant sans limites, la perte ou le gain commercial, ou pour des dépenses circonstanciels, perte de temps, ou pour le trouble.

Certains États ne permettent pas d'avoir de limitation sur comment longtemps une garantie tacite dure ou l'exclusion de dommages fortuits ou indirects, donc les exclusions ou les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer.

Autre Droits Légaux

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para evitar lesiones graves y la pérdida de vidas/bienes, además de garantizar el funcionamiento adecuado y seguro de su producto, lea atentamente esta sección antes de utilizarlo.



Conexión eléctrica

- Solo use la alimentación eléctrica que se indica en el producto.
- No sobrecargue tomacorrientes ni cables prolongadores. Eso puede causar riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Coloque por completo el adaptador de CA/enchufe en el tomacorriente. Si no lo hace, puede ocurrir una descarga eléctrica o ruido excesivo y causar un incendio.
- Limpie habitualmente el adaptador de CA/enchufe. Para ello, desenchúfelo y pase un paño seco por el tomacorriente y el adaptador. La acumulación de polvo puede provocar fallas en el aislamiento a causa de la humedad u otros factores y provocar un incendio.
- Desenchufe el producto de tomacorrientes eléctricos si observa una emisión de humo, percibe un olor anormal o un ruido poco habitual. Estas condiciones pueden causar incendio o descarga eléctrica. Confirme que la emisión de humo ha cesado y comuníquese con el servicio de atención al cliente de Clarity al 800-426-3738.
- Desenchufe el producto de tomacorrientes eléctricos y nunca toque el interior del producto si la caja está rota.
- Nunca toque el enchufe con las manos mojadas. Existe riesgo de descarga eléctrica.

Instalación

- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia ni a la humedad.
- No ubique ni utilice este producto cerca de dispositivos con control automático, como puertas automáticas y alarmas de incendio. Las ondas de radio emitidas por este producto pueden causar desperfectos en esos dispositivos y provocar un accidente.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Instalación y ubicación

- Nunca instale el cableado telefónico durante una tormenta eléctrica.
- No instale nunca enchufes de teléfono en lugares húmedos, a menos que estén diseñados específicamente para dichas condiciones.
- Nunca toque cables de teléfono o terminales sin aislamiento, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de red.
- Sea precavido cuando instale o modifique líneas telefónicas.
- El adaptador de CA se utiliza como dispositivo de desconexión principal. Verifique que el tomacorriente de CA esté instalado cerca del producto y sea de fácil acceso.
- Este producto no puede realizar llamadas cuando hay un corte de luz (a menos que las baterías de reserva estén instaladas y completamente cargadas).

Cuando use el producto, debe cumplir con ciertas precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendios, descarga eléctrica y lesiones. Algunas de esas precauciones son las siguientes:

- No use el producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, palangana, fregadero o tina para lavado de ropa, en un sótano húmedo ni cerca de una piscina.
- Evite usar un teléfono (que no sea inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede existir el riesgo remoto de descarga eléctrica producida por un rayo.
- No use el teléfono para informar de una pérdida de gas si usted se encuentra próximo a la fuga.
- Solo use el cable y las baterías que se indican en este manual. No arroje las baterías al fuego, ya que podrían explotar. Verifique los códigos locales para saber si existen instrucciones para su disposición.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS BATERÍAS

ADVERTENCIA: DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES.

- No arroje baterías al fuego porque podrían explotar. Verifique los códigos locales para saber si existen instrucciones especiales para desecharlas.
- No abra ni rompa una batería. El electrolito liberado es corrosivo y puede provocar daños en los ojos y la piel. Puede ser tóxico si se ingiere.
- Sea precavido cuando manipule baterías para evitar que se produzca un cortocircuito con materiales conductores, como anillos, brazaletes o llaves. Las baterías o el material conductor pueden recalentarse y ocasionar quemaduras.
- Retire las baterías cuando estén descargadas y cuando no vaya a utilizar el equipo durante un período prolongado. Deseche las baterías de acuerdo con las leyes ambientales locales.
- No desarme, caliente, aplaste, deforme ni pinche las baterías.
- No intente cargar baterías que no sean recargables.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Aviso para el desecho, la entrega o la devolución del producto

- Este producto puede guardar información suya privada/confidencial. Para proteger su privacidad/confidencialidad, le recomendamos que borre de la memoria información como el directorio telefónico o la lista de las personas que llamaron, antes de desechar, entregar o devolver el producto.
- Este equipo está diseñado para usar en Estados Unidos de América y Canadá. Vender o usar este producto en otros países puede violar leyes locales.

Introducción a Clarity Logic

ClarityLogic es el nombre de nuestra simplificado y fácil de usar el servicio de soporte al cliente. Cuando se utiliza el botón ClarityLogic a contactar a los representantes de atención al cliente de Clarity, y autorizar Clarityto recibir información específica sobre su teléfono, Clarity puede acceder a información sobre el teléfono, tales como el nombre del modelo del teléfono y ajustes. De inmediato, el representante toma conocimiento del tipo de teléfono y de las configuraciones actuales. Esto permite que cualquier llamada para detectar y resolver problemas sea rápida y simple, lo que lo ayuda a usted a encontrar exactamente lo que está buscando. Solo llame a 1-877-LOGIC24 (1-877-564-4224) para conocer cómo trabaja Clarity y simplifique su vida.

Llamada a ClarityLogic® utilizando la memoria del equipo

Para su comodidad, Clarity ha programado Anteriormente el número de asistencia al cliente en el botón azul ClarityLogic que se encuentra en su teléfono.

Nota: *ClarityLogic ha sido diseñado para trabajar con el servicio telefónico tradicional Plain Old Telephone Service (POTS). Si su servicio telefónico es suministrado por un proveedor de banda ancha, ClarityLogic puede funcionar. SOLO CLARITYLOGIC PUEDE DESHABILITARSE. EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAN TAL COMO SE DESCRIBEN EN ESTA GUÍA DEL USUARIO.*

INSTALACIÓN

Gracias por comprar el nuevo Giant de Clarity, el mejor altavoz domiciliario de su clase. Lea estas instrucciones para asegurarse de aprovechar todas las generosas funciones que ofrece este producto.


Cuando retira el producto de la caja, éste ya está armado. Sin embargo, usted deberá conectar el cable de alimentación y el cable telefónico, e instalar seis (6) baterías recargables AA NiMH, si desea batería de reserva en caso de producirse un corte de luz. (Las baterías son P opcionales y no están incluidas.)

Conexión del cable de alimentación y el telefónico

Paso 1: Ubique en su hogar un tomacorriente eléctrico (1) cerca de una toma telefónica.

Paso 2: Tire de los extremos del cable telefónico para estirarlo; enchufe el extremo libre en la toma telefónica (2).

Paso 3: Tire de los extremos del cable de alimentación para estirarlo; conecte el enchufe al tomacorriente eléctrico (3).

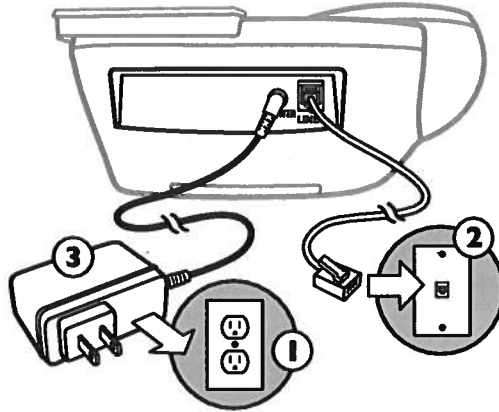


Instalación de las baterías

(opcionales)

Paso 1: Deslice hacia arriba la tapa del compartimento de las baterías y destápelo.

Paso 2: Coloque seis (6) baterías recargables AA NiMH como se muestra en la imagen. Haga coincidir las terminales (+) y (-) de cada una de las baterías con las conexiones (+) y (-) que se encuentran dentro del compartimento.

Paso 3: Para finalizar la instalación de las baterías, vuelva a tapar el compartimento.

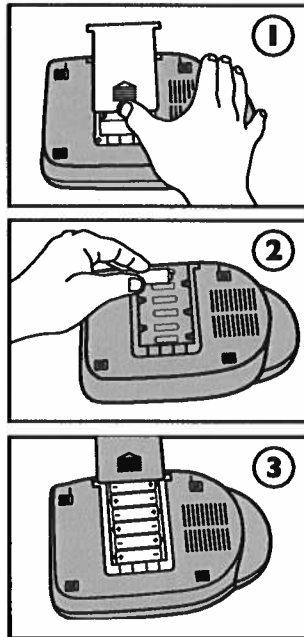

CONOZCAMOS EL ALTAVOZ

1	FIND Presione esta tecla para encontrar los auriculares inalámbricos (opcionales, se adquieren por separado).
2	CLARITY LOGIC Presione esta tecla para comunicarse directamente con los representantes del servicio al cliente de ClarityLogic, lo que le permite recibir asistencia de primer nivel a través de nuestra tecnología patentada de acceso remoto para clientes.
3	FLASH Presione esta tecla entre una llamada y otra (si usted está suscripto al servicio de llamada en espera a través de su proveedor telefónico).
4	REDIAL Presione esta tecla para volver a marcar el último número al cual usted llamó. Manténgala presionada para ingresar una pausa de 2 segundos cuando esté programando registros en el directorio telefónico.
5	MUTE/SILENT <ul style="list-style-type: none"> • Mientras suena el teléfono: presione esta tecla para silenciar temporalmente el timbre audible. (únicamente para llamadas salientes) • Durante una llamada, presione esta tecla para silenciar su lado de la llamada. (por privacidad - titilará el botón rojo de la tecla para indicar que el sonido se encuentra temporalmente apagado.) • Durante el modo de espera, presione esta tecla para silenciar el timbre. (Cuando el timbre esté apagado, la luz roja de la tecla quedará encendida.)
6	SPEAKER
7	VISUAL RINGER Esta tecla destella cuando se reciben llamadas.
8	VOLUME CONTROL Lleve el selector de volumen hacia arriba o hacia abajo para aumentar/ bajar el volumen.
9	BOOST Presione esta tecla para comprometer potencia adicional en su altavoz.

CONOZCAMOS EL ALTAVOZ

La pantalla táctil tiene teclas virtuales que lo ayudarán con la funcionalidad simple de este producto.

Instrucciones generales para navegar por los menús y las pantallas (Véase la Figura 1)

- En cualquier momento, mientras navega por los menús y configuraciones, presione el botón Flash para volver a la pantalla de modo de espera.
- Utilice las teclas en forma de flecha que aparecen en pantalla para subir o bajar por las opciones del menú. Estas flechas se encuentran en el ángulo superior izquierdo y derecho del menú en pantalla del LCD.
- Utilice la tecla “Atrás” (que se encuentra en el ángulo inferior izquierdo del menú en pantalla del LCD) para regresar al nivel anterior en el menú de configuración.
- Utilice la tecla Guardar que aparece en pantalla para guardar sus configuraciones. Para salir sin guardar ningún cambio, utilice la tecla Atrás y regrese a la pantalla anterior.

En modo de espera, en las pantallas del aparato telefónico Giant aparece la siguiente información (Véase la Figura 2)

- **Estado del contestador automático: (Encendido u Apagado)** Si la línea telefónica no está enchufada a la unidad: (Sin línea) Este mensaje, a través del cual se indica que no hay línea, alterna con el mensaje del estado del contestador automático.
- **Fecha/Hora:** Se debe configurar manualmente en el menú (ver más abajo) para mantener con exactitud la hora de los mensajes en el contestador automático.
- **Tecla MENÚ:** Accede a las configuraciones del altavoz.
- **Tecla Mensajes:** Accede fácilmente a los mensajes que se han dejado en el contestador automático, si su modelo está equipado con esa opción. Si el modelo de su aparato no tiene esa opción, entonces usted no verá la tecla “Mensajes” en la pantalla.
- **Tecla Directorio:** Accede fácilmente a las ubicaciones de la memoria para los números telefónicos marcados con mayor frecuencia.

USO DEL ALTAVOZ

PROCEDIMIENTO PARA LLAMAR

Existen cuatro formas de realizar una llamada externa con su altavoz. marcación Anterioria, marcación directa, marcación utilizando el directorio telefónico y marcación desde la lista de rellamada.

Marcación Anterioria

Ingrese el número telefónico utilizando el teclado numérico y presione la tecla "TALK". (Figura 3)



Figura 3

Marcación directa

Presione la tecla "TALK" y luego marque manualmente el número utilizando el teclado numérico. (Figura 3)

Marcación utilizando el directorio telefónico

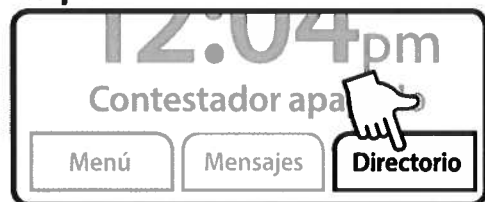


Figura 4

Presione la tecla "Directorio" del menú principal (Figura 4) para acceder al directorio telefónico. Presione la tecla "Siguiete", para avanzar, o "Anterior", para retroceder, (Figura 5) hasta encontrar el número telefónico que desea marcar. A continuación, presione la tecla "TALK". (Figura 3)

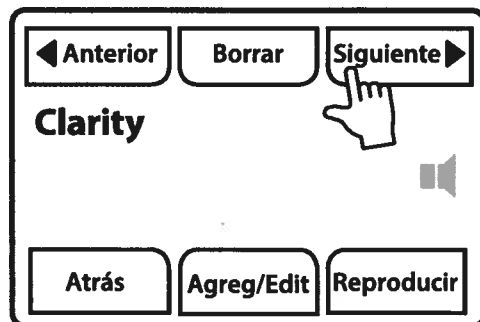


Figura 5

Marcación desde la lista de rellamada

Presione la tecla de rellamada Redial (Figura 6) a la izquierda del menú en pantalla, luego seleccione el número que volverá a marcar de la lista, utilizando las teclas "Siguiete" o "Anterior" (Figura 7). A continuación, pulse la tecla "TALK". (Figura 1)

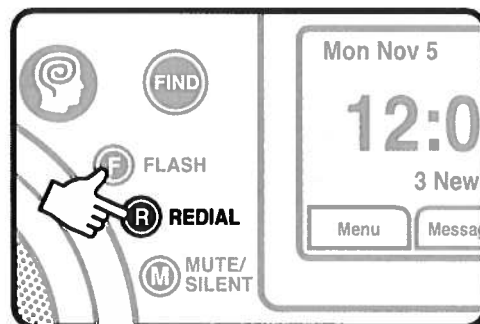


Figure 6

USO DEL ALTAVOZ

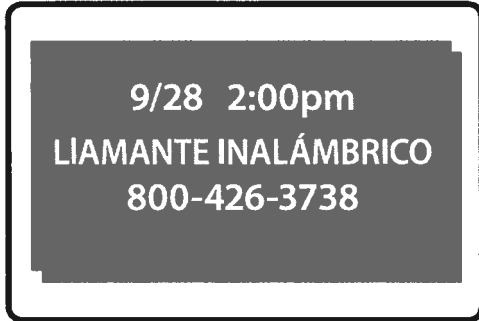


Figura 11

Presione la tecla "TALK" para contestar y conectar la llamada. **Nota:** Si desea responder en forma automática a la llamada, en el menú avanzado "Menú avanzado", lleve la opción "Auto-respuesta" a la posición de encendido Encendido.

Nota: Si desea visualizar en la pantalla la identificación de la persona que llama, debe suscribirse a ese servicio a través de su proveedor telefónico.

Durante una llamada

Utilice el selector de volumen (Figura 12) y la tecla Tono en pantalla (Figura 13), para ajustar mejor el audio en una comunicación telefónica.

Presione la tecla Tono en la pantalla y verá, a través de un gráfico, cuál es el ajuste actual del tono. Mientras ve en pantalla el gráfico, presione nuevamente la tecla Tono para alternar entre los ajustes de tono disponibles (este equipo tiene 4 configuraciones). Cuando el ajuste del audio se adapte correctamente a sus necesidades, deje que el equipo vuelva a la pantalla anterior.

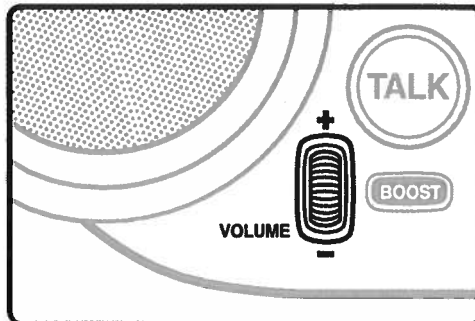


Figura 12

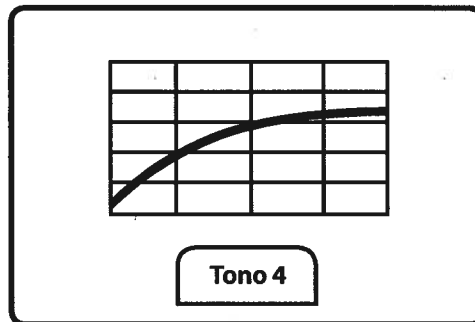


Figura 13

Ajuste el volumen de la voz entrante utilizando el selector. Haga rodar el selector hacia arriba para subir el volumen y hacia abajo, para bajarlo. Cuando esté subiendo el volumen, usted verá tres colores diferentes en la pantalla.

El excelente comportamiento en cuanto a audio de su altavoz le ofrece a usted la mejor experiencia, con una amplia gama de volúmenes y tonalidades que garantizan llamadas claras y potentes.

Otra alternativa es utilizar auriculares, un collar, un auricular individual sin cable o un colgante (todos estos accesorios son

REQUISITOS Y NORMATIVA DE LA FCC

INFORMACIÓN SOBRE LA PARTE 68 DE LOS REGLAMENTOS DE LA FCC

Este equipo cumple con las normas y requisitos establecidos en la Parte 68 de la FCC, adoptada por la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones de los Estados Unidos (ACTA, por sus siglas en inglés). En la parte inferior de este equipo se encuentra una etiqueta que provee, entre otras informaciones, un identificador de producto con el formato US: ACJ-----.

- Debe proporcionar este número a la compañía telefónica si se lo solicitan.
- Número de registro.....(se encuentra en la base del equipo)
- Número de Equivalencia de Timbres (REN).....0,IB

El enchufe y el tomacorriente utilizados para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica deben cumplir con las normas y requisitos correspondientes de la Parte 68 de la FCC, adoptada por la ACTA. Con este producto se suministran un cable de teléfono y un enchufe modular que cumplen con los requisitos. Este está diseñado para ser conectado a un tomacorriente modular compatible, que también cumpla con los requisitos.

El REN se utiliza para determinar la cantidad de aparatos que pueden conectarse a una línea telefónica. Una cantidad excesiva de REN en una línea telefónica puede hacer que los dispositivos no suenen cuando se reciba una llamada entrante.

En la mayoría de las áreas, no en todas, la suma del REN no debería superar el número cinco (5.0). Contacte a su compañía telefónica local para estar seguro de la cantidad de aparatos que puede conectar a una línea, según el total del REN. Para los productos aprobados después del 23 de julio de 2001, el REN forma parte del identificador del producto bajo el formato US: AAAEQ##TXXXX. Los dígitos representados por ## corresponden al REN sin el punto decimal (por ejemplo, 03 significa un REN de 0.3).

Si este equipo provoca daños a la red telefónica, la compañía le notificará con anticipación que es necesario efectuar una interrupción temporal del servicio. En caso de que no sea posible avisar con anticipación, la compañía telefónica notificará al cliente lo más pronto posible. Además, le avisarán de sus derechos de presentar una queja ante la FCC si lo considera necesario.

La compañía telefónica puede realizar cambios en sus instalaciones, equipos, operaciones o procedimientos que podrían afectar el funcionamiento del equipo. Si esto ocurriera, la compañía telefónica avisará con anticipación para que usted realice las modificaciones necesarias para mantener el servicio sin interrupciones. Si se presenta algún problema con este equipo, necesitara alguna reparación o información sobre la garantía, comuníquese con el centro de servicio técnico de la fábrica u otro centro autorizado. Si el equipo está provocando daños a la red telefónica, la

REQUISITOS Y NORMATIVA DE LA FCC

able contra la interferencia perjudicial en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si su instalación y uso no se realiza según las instrucciones, puede producirse una interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que no ocurrirán interferencias en una instalación particular. Si este equipo causara interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual se determinará apagando y encendiendo el equipo, invitamos al usuario a que intente corregirla mediante uno o más de los siguientes procedimientos:

- Vuelva a orientar o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el teléfono a una toma o circuito diferente del que utiliza para enchufar el receptor.
- Pida ayuda al distribuidor o a un técnico de radio y televisión con experiencia.

Algunos teléfonos inalámbricos funcionan en frecuencias que pueden causar interferencia a aparatos de televisión y video cercanos. Para reducir al mínimo o evitar esa interferencia, la base del teléfono inalámbrico debe ubicarse cerca o sobre el televisor o equipo de video. Si sufre interferencia, aleje un poco más el teléfono inalámbrico de esos equipos. Esto a MENÚdo reducirá o eliminará la interferencia.

Advertencia de la FCC sobre la exposición a radiofrecuencia:

- Este producto cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para ambientes no controlados.
- Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencia de la FCC, la base del equipo debe estar instalada y operada a 20 cm (8 pulgadas) o más respecto del cuerpo del usuario (incluidas las extremidades de las manos, muñeca y pies).
- Este producto no se puede colocar ni operar junto con ninguna otra antena ni transmisor.
- El auricular solo se puede llevar y operar con el clip para cinturón específicamente suministrado. Otras sujeciones para cinturones que no estén probadas o accesorios similares para uso portátil pueden no cumplir con las normas y deben evitarse.

Aviso

La identificación de la FCC se puede encontrar dentro del compartimento de las baterías o en la base de la unidad.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

La siguiente garantía e información de servicio sólo es aplicable a productos adquiridos y utilizados en los Estados Unidos y Canadá. Contáctese con su distribuidor o vendedor local para mayor información acerca de la información de garantía en otros países.

Garantía Limitada: Clarity, una división de Plantronics, Inc. ("Clarity") garantiza al comprador usuario original que, salvo las limitaciones y excepciones delineadas más abajo, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha original de compra ("Período de Garantía"). La obligación de Clarity según la presente garantía será elección de Clarity, sin cargo, de cualquier parte o unidad que sea en efecto defectuosa por materiales o mano de obra durante el Período de Garantía.

Excepciones a la Garantía: Esta garantía sólo es aplicable a defectos en los materiales de fabricación y mano de obra de fabricación. Cualquier condición que haya sido causada por accidentes, abuso, mal uso u operación inadecuada, violación a las instrucciones provistas por Clarity, destrucción o modificación, corrientes o voltajes inapropiados, o reparación o mantenimiento a cargo de alguien distinto a Clarity o sus centros de servicios autorizados, no es un defecto cubierto por la presente garantía. Las

companies telefónicas fabrican distintos tipos de equipos y Clarity no garantiza que

este equipo sea compatible con los equipos de determinada compañía telefónica.

Garantías Implícitas: Según la ley estatal, puede tener derecho a ciertas garantías implícitas. Estas garantías implícitas continuarán en vigor sólo durante el período de garantía. En algunos estados las garantías implícitas no prescriben, por lo que las limitaciones arriba descritas pueden no ser aplicables a usted.

Daños Incidentales o Consecuentes: Ni Clarity ni su vendedor local o distribuidores tienen ninguna responsabilidad sobre daños Incidentales o consecuentes, incluyendo, sin límites, lucro cesante o pérdidas comerciales, o de cualquier gasto, pérdida de tiempo o inconveniente incidental. En algunos estados los daños incidentales o consecuentes no tienen excepciones o limitaciones, por lo que las limitaciones arriba descritas pueden no ser aplicables a usted.

Otros Derechos Legales: Esta garantía le confiere derechos legales específicos y puede tener otros derechos que varían de estado en estado.

Cómo Conseguir el Service EnGarantía: Para obtener service en garantía, por favor pague el envío por adelantado y envíe la unidad a la instalación adecuada abajo listada:



Clarity, a Division of Plantronics, Inc.
6131 Preservation Drive
Chattanooga, TN 37416

Tel: 800-426-3738 Fax: 800-325-8871

E-mail: claritycs@plantronics.com

Website: www.clarityproducts.com

©2012 Clarity, a Division of Plantronics, Inc. All rights reserved. Clarity, Clarity Logic, Smart for Seniors, and Giant are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc.

Rev. B (9-13)
Printed in USA